



COOO SÌ COMODO È **IDENTIUM**®

IMPRONTA DI PRECISIONE



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

IDENTIUM® – L'ESCLUSIVA COMBINAZIONE DI MATERIALI!

Materiale da impronta di precisione di nuova generazione

Combina i vantaggi di due collaudati materiali da impronta (silicone A e polietere) – Vinylsiloxanether®.




ESCLUSIVA PRESA D'IMPRONTA

- Impronta simultanea
- Impronta monofasica



INDICAZIONI

- Corone e ponti
- Inlay/Onlay
- Impronta funzionale
- Impianti
- Ricostruzioni combinate (impronta di fissaggio)
- Impronta pick-up

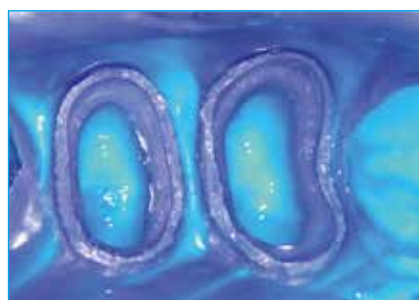

Impronta simultanea




Impronta dell'impianto



IDENTIUM® – COMODO IN TUTTE LE DIMENSIONI

Rimozione semplicissima dal cavo orale

Forze di trazione **2,6 volte** inferiori Identium® vs Impregum™*

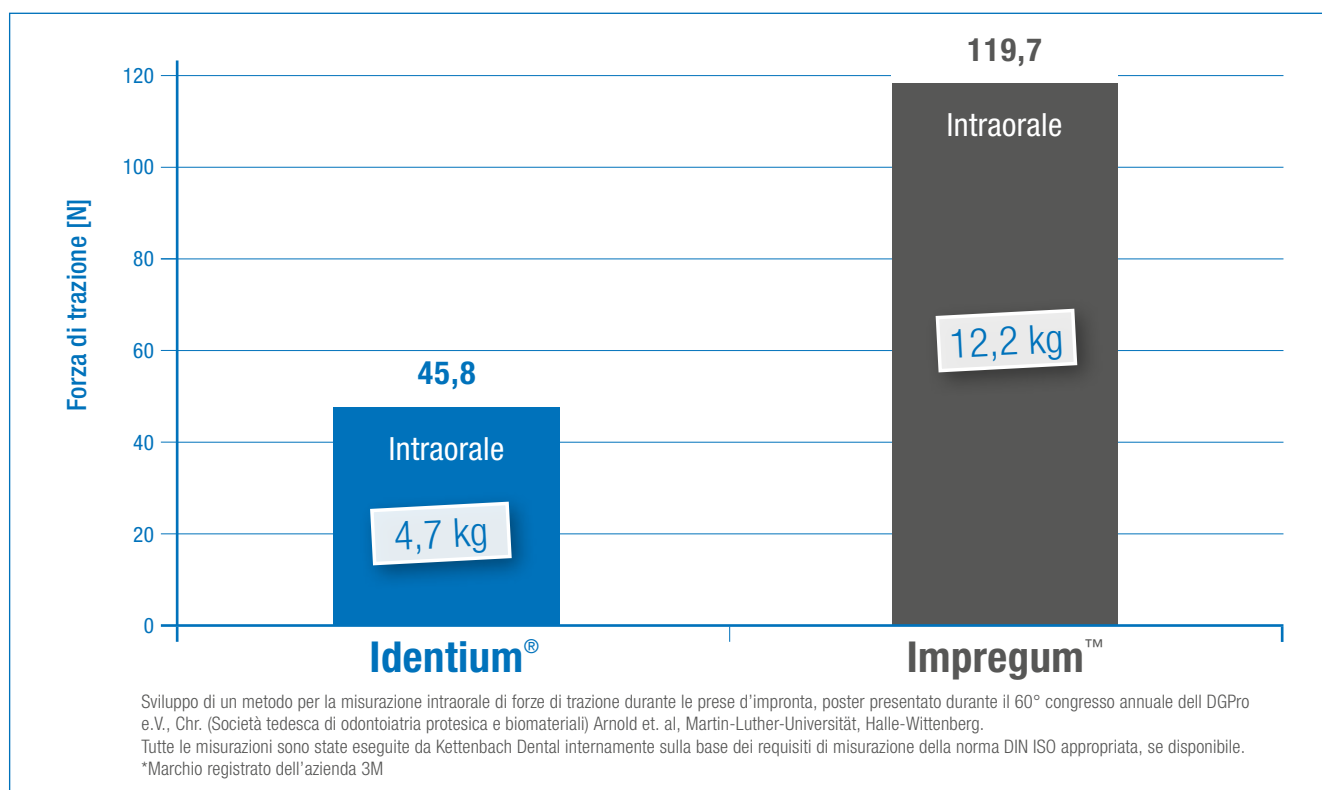

La rimozione dalla bocca del paziente senza applicare alcuna forza evita deformazioni e irritazioni.


Per massima precisione.



Vantaggi che anche i vostri pazienti apprezzeranno.

Rapido tempo di presa totale

in caso di tempo di lavorazione sufficiente e breve permanenza nel cavo orale

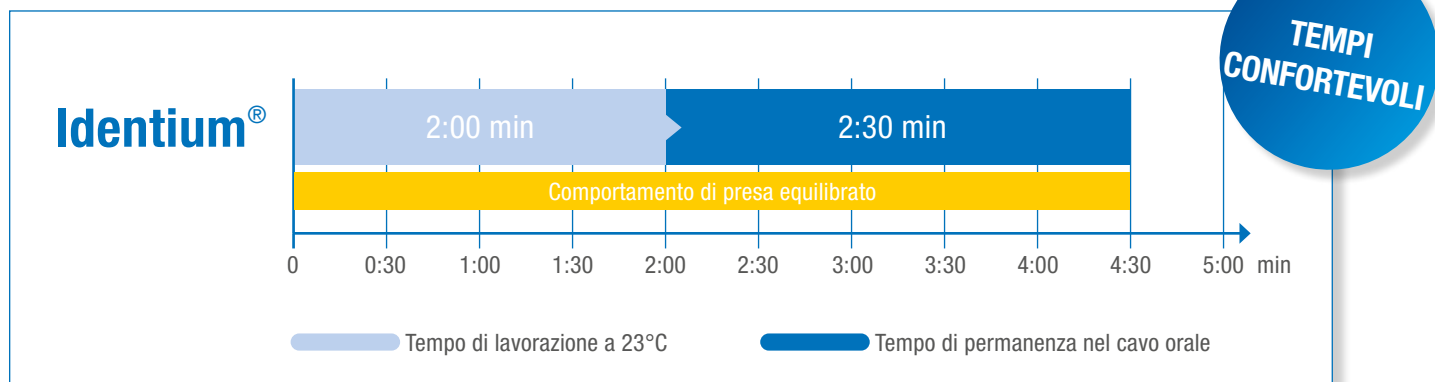

Il tempo di lavorazione sufficiente vi consente di lavorare in tutta tranquillità.
Per massima precisione.

Eccellente fluidità



Con l'eccezionale scorrevolezza di **Identium® Light**, è possibile riprodurre con grande dettaglio anche i vuoti più stretti.
Per massima precisione.



- Il materiale inodore e insapore riduce il rischio di stimolo al vomito
- Presa rapida ed estrazione semplice dal cavo orale per una sensazione rilassante e gradevole
- Inizialmente idrofilo – buone prestazioni anche in presenza di umidità residua

PRESA D'IMPRONTA COMODA E PRECISA



FACILE RIMOZIONE DAL CAVO ORALE

BREVE TEMPO DI PERMANENZA
NEL CAVO ORALE

INIZIALMENTE IDROFILO



Disponibile nelle viscosità
Heavy, Medium e Light



Possibilità di scelta tra velocità di presa
regular (4:30 min)
e **fast** (3:30 min)



Compatibile con tutti gli
apparecchi di miscelazione
reperibili in commercio



IDENTIUM® – ASSORTIMENTO

		Identium®				
HEAVY		Identium® Heavy		Identium® Heavy Fast		
	Intro pack	REF 1472411		–		
		Cartuccia da 380 ml, cartuccia da 50 ml Identium® Light, adesivo da 10 ml, 10 miscelatori dinamici, 6 puntali di miscelazione, rossi, 6 Intraoral tips, trasparenti			–	
Refill pack	REF 14725		REF 14727			
	2 cartucce da 380 ml			2 cartucce da 380 ml		
MEDIUM		Identium® Medium		Identium® Medium Fast		
	Intro pack	REF 14716		–		
		Cartuccia da 380 ml, adesivo da 10 ml, 10 miscelatori dinamici, 1 siringa di applicazione			–	
Refill pack	REF 14717		REF 14719			
	2 cartucce da 380 ml			2 cartucce da 380 ml		
LIGHT		Identium® Light		Identium® Light Fast		
	Normal pack	REF 1370111		REF 1371111		
2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, rossi			2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, rossi			
ACCESSORI	Identium® Adhesive	Dynamic Mixers	Mixing tips	Sympress Dispenser	Applyfix 5	
	REF 14204	REF 17900	REF 17249 / REF 17250	REF 35910	REF 17204	
	Flacone da 10 ml	45 pezzi blu	50 puntali di miscelazione, rossi / 100 puntali di miscelazione, rossi	Dispositivo elettrico di dosaggio e miscelazione	2 siringhe di applicazione, 12 puntali per siringa	



APPUNTI

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it

Non per l'uso la vendita e la distribuzione in Germania.


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent



062794_1024