




Nuovo sistema di cartucce
NUOVO ADESIVO



COOSÌ ADESIVO È MUCOPREN® SOFT

RIBASATURA MORBIDA

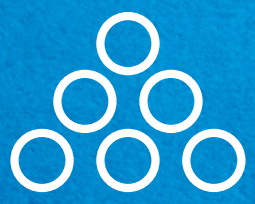

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT

Ribasatura di protesi

Mucopren® Soft è un materiale per la ribasatura morbida permanente a lungo termine a base di silicone A per l'uso diretto o indiretto.



Particolare adesione durevole:

Eccellente fissaggio adesivo per protesi in resina grazie a Mucopren® adesivo brevettato

Sigillatura esclusiva grazie alla superficie in silicone liscia e idrofoba:

Impedisce la proliferazione batterica garantendo in tal modo condizioni igieniche nella protesi¹⁾



Video dell'applicazione

Semplice manipolazione e rapida lavorazione

I moderni tempi di presa e i brevi tempi di pausa garantiscono una routine rapida e perfetta nello studio e nel laboratorio.

Favorisce il processo di guarigione in caso di impianti

Indicato anche per l'uso in implantologia per la perfetta osteointegrazione.



Comfort elevato

La morbida ribasatura è completamente inodore e insapore e consente di indossare la protesi nel modo più piacevole possibile.

¹⁾ Risultato di studi in-vitro in cui è stata dimostrata la possibilità di impedire la crescita di *Candida albicans* grazie alla superficie liscia in silicone

MANTIENE LE PROMESSE



ULTERIORI INDICAZIONI



- Per realizzare **ribasature che rimangono sempre morbide**
- Per scaricare zone interessate da interventi **implantochirurgici**
- Per compensare aree della mucosa a differente resilienza
- Per scaricare margini ossei a spigoli vivi
- Per ribasare **protesi provvisorie**
- Come **condizionatore della mucosa** in caso di stomatiti provocate da protesi
- Per la realizzazione e la ribasatura di **otturazioni**

Vantaggi dell'applicazione grazie al nuovo adesivo



STUDIO

3 MIN

È possibile continuare a lavorare la protesi dopo soli **3 minuti** di pausa dopo la rimozione dal cavo orale.



LABORATORIO

3 MIN

Il tempo di pausa si riduce ancora a soli **3 minuti** nella pentola a pressione o nel bagno d'acqua.

» **1 sola**
APPLICAZIONE
NECESSARIA



MUCOPREN® SOFT – ASSORTIMENTO



Mucopren® Soft

Mucopren® Soft Set di base

REF 28105

50 ml Mucopren® Soft, 50 ml di silicone sigillante, 10 ml di adesivo, 6 puntali di miscelazione blu, 16 puntali di miscelazione rossi, 1 porta pennelli, 20 pennelli monouso, 1 fresa in acciaio, accessori



Mucopren® Soft Confezione standard

REF 15687

2 x 50 ml Mucopren® Soft, 6 puntali di miscelazione blu



Mucopren® Silicone sigillante

REF 15686

Silicone sigillante 50 ml Mucopren®, 8 puntali di miscelazione rossi



Mucopren® Adhesive

REF 14203

10 ml Mucopren® Adhesive



Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Rapporto di miscelazione	Tempo di lavorazione a 23°C ≤	Tempo di permanenza in bocca a 35°C ≥	Bagno d'acqua	Tempo di presa totale ≥	Durezza Shore (ca.)
Mucopren® Soft – ribasatura diretta	1:1	02:15 min	03:15 min	Non pertinente	5:30 min*	A 28
Mucopren® Soft – ribasatura indiretta	1:1	02:15 min	Non pertinente	03:00 min	> 3 min	A 28
Mucopren® Soft Silicone sigillante	1:1	01:30 min	Non pertinente	Non pertinente	6:30 min a 23°C	A 33

*Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione

APPUNTI

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines · France
+39 3458 050 129
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it

Non per l'uso la vendita e la distribuzione in Germania.



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

062797_1524

