



**NOVITÀ**



COOO SÌ ARTISTICO

CON **VISALYS<sup>®</sup> FILL** & **VISALYS<sup>®</sup> FLOW**

**COMPOSITO RIEMPITIVO NANO-IBRIDO UNIVERSALE**



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

# VISALYS® FILL & VISALYS® FLOW

## Composito riempitivo nano-ibrido universale in 2 consistenze

### PER TUTTI I CASI

- Per tutte le otturazioni di classe da I a VI
- Per la ricostruzione di monconi sotto corone e la riparazione di otturazioni difettose
- Per la correzione estetica della forma
- Può essere utilizzato con qualsiasi adesivo fotopolimerizzabile standard

### FLEX SHADE SYSTEM: SEMPLIFICA LA SCELTA DEL COLORE

- Scegliete il colore più adatto con l'ausilio del Flex Shade System
- Adattamento armonico nella cavità grazie all'effetto mimetico per **tutti i 16 colori Vita** nella regione anteriore e latero-posteriore con **solì 5 colori**

### MATERIALE PIACEVOLE DA MANEGGIARE

- Non si attacca allo strumento, buona capacità di modellazione (Visalys® Fill)
- Equilibrio ottimale tra scorrevolezza e stabilità (Visalys® Flow)

### ECCELLENTI CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Elevato contenuto di riempitivo: 87% (Visalys® Fill) e 80% (Visalys® Flow)
- Resistenza alla flessione sopra la media:  
147 MPa (Visalys® Fill) e 112 MPa (Visalys® Flow)

### LUNGA DURATA DELLE OTTURAZIONI

- Il ridotto assorbimento d'acqua comporta minime discromie
- Usura ridotta grazie alla sofisticata tecnologia per otturazioni di lunga durata



# SEMPLICE ABBINAMENTO CROMATICO GRAZIE AL FLEX SHADE SYSTEM



**Il FLEX SHADE SYSTEM consente di lavorare in modo efficiente con soli 7 COLORI per i restauri estetici**

Qui è possibile trovare i colori principali Visalys® Fill & Visalys® Flow a sinistra e gli abbinamenti ottimali dei colori Vita<sup>1)</sup> a destra



COLORI DEI PRODOTTI	DENTI VITA (incl. otturazione da colori Visalys® Fill) <sup>1)</sup>			
<b>A1</b> LIGHT BRIGHT	A1	B1	C1	
<b>A2</b> BRIGHT	A2	B2	D2	
<b>A3</b> MEDIUM BRIGHT	A3	B3	D3	D4
<b>A3.5</b> MEDIUM DARK	A3.5	C2	C3	B4
<b>A4</b> DARK	A4	C4		

In caso di colore particolarmente chiaro dei denti, utilizzare il colore BL<sup>2)</sup>

COLORI DEI PRODOTTI	DENTI VITA (incl. otturazione da colore Visalys® Fill BL) <sup>2)</sup>		
<b>BL</b> WHITE	OM1	OM2	OM3



In presenza di cavità decolorate, è sufficiente coprire con OA2


COLORI DEI PRODOTTI	DENTI VITA (incl. otturazione da colori Visalys® Fill) <sup>1)</sup>	
<b>OA2</b> OPAQUE	A1 Strato 1: otturazione con Visalys® Fill colore <b>OA2</b> Strato 2: otturazione con Visalys® Fill colore <b>A1</b>	A4 Strato 1: otturazione con Visalys® Fill colore <b>OA2</b> Strato 2: otturazione con Visalys® Fill colore <b>A4</b>




1) Otturazioni di classe 1 in denti protesici, ad es. con Visalys® Fill per dimostrare la coerenza del Flex Shade Systems.  
2) Otturazioni di classe 4 in denti protesici, ad es. con Visalys® Fill per dimostrare la coerenza del Flex Shade Systems.

# VISALYS® FILL & VISALYS® FLOW – STABILITÀ DUREVOLE

## VISALYS® FILL Resistenza alla flessione prima e dopo il carico termico alternato<sup>3)</sup>

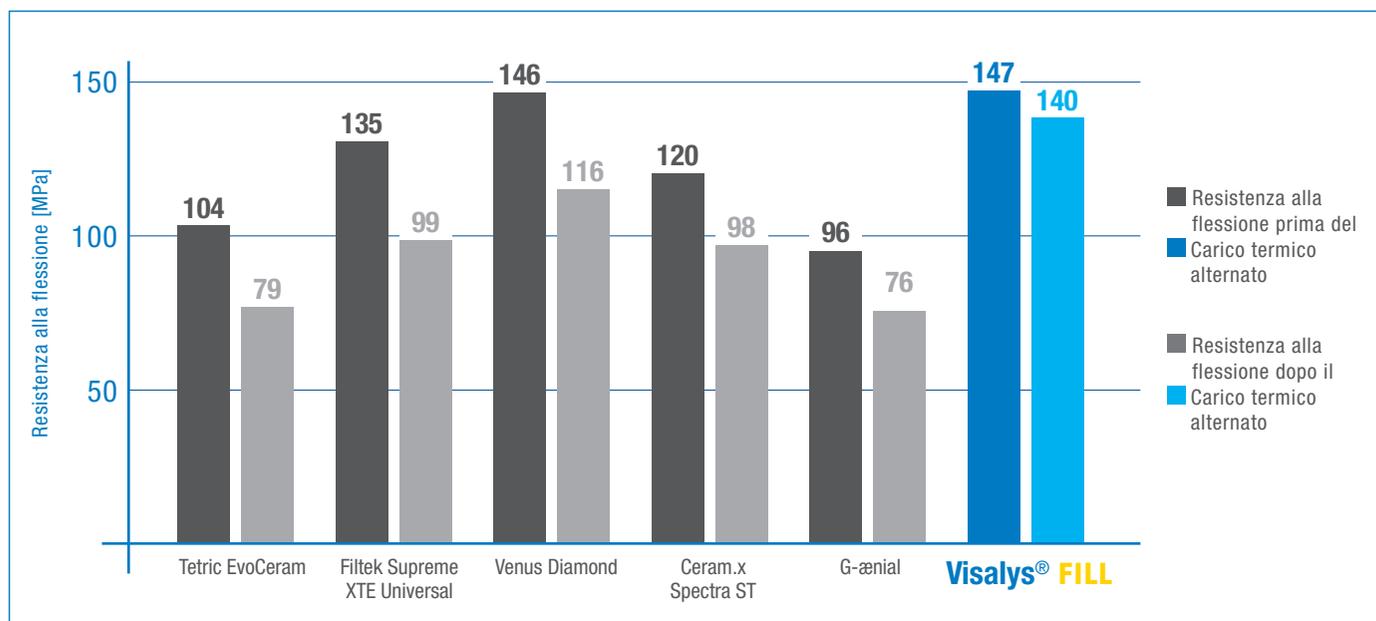

## VISALYS® FLOW Resistenza alla flessione prima e dopo il carico termico alternato<sup>3)</sup>

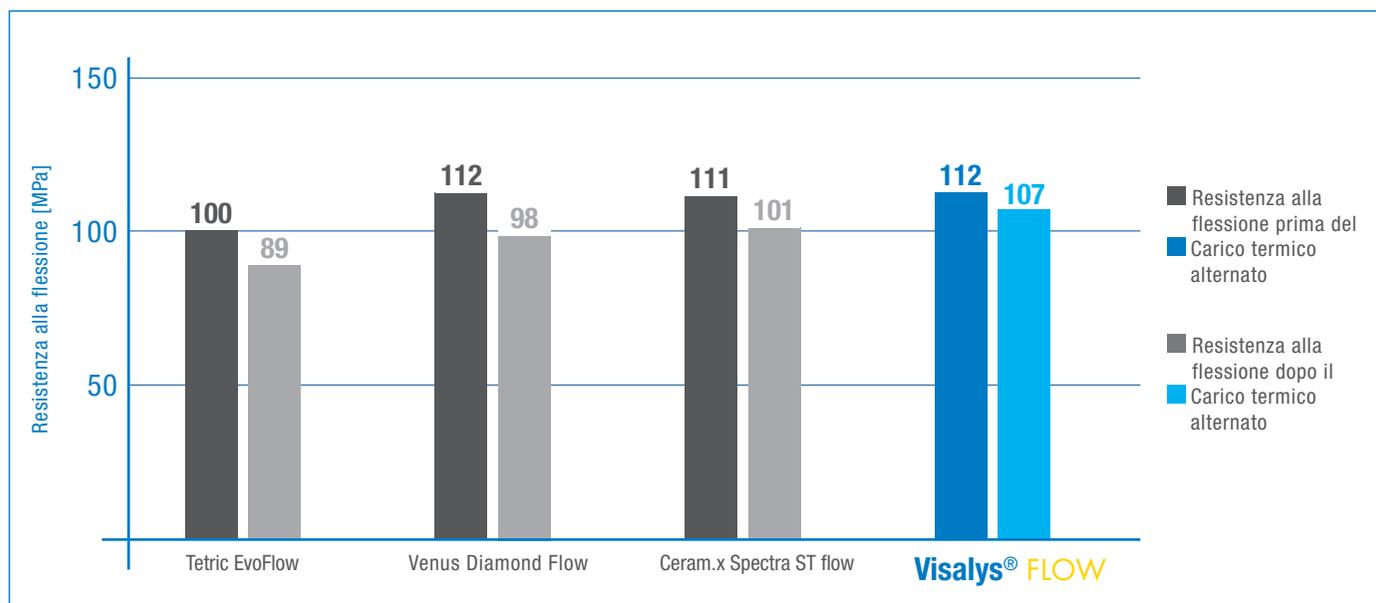


### MASSIMA RESISTENZA ALLA FLESSIONE ANCHE DOPO L'APPLICAZIONE DEL CARICO




- Il carico termico alternato corrisponde a una permanenza nel cavo orale fino a 12 mesi (5000 cicli a 5°C e 55°C)
- I valori rappresentano la stabilità persistente in condizioni *in vivo*

# PIÙ VETRO CHE PLASTICA

## VISALYS® FILL Percentuale inorganica nel composito<sup>4)</sup>

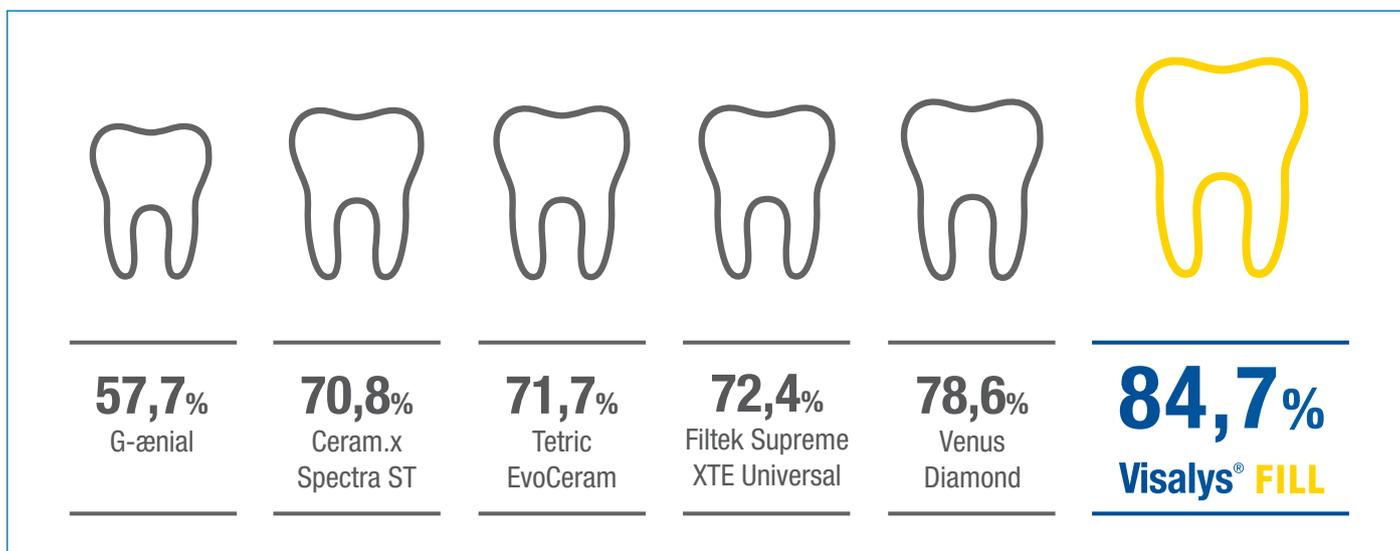

## VISALYS® FLOW Percentuale inorganica nel composito<sup>4)</sup>

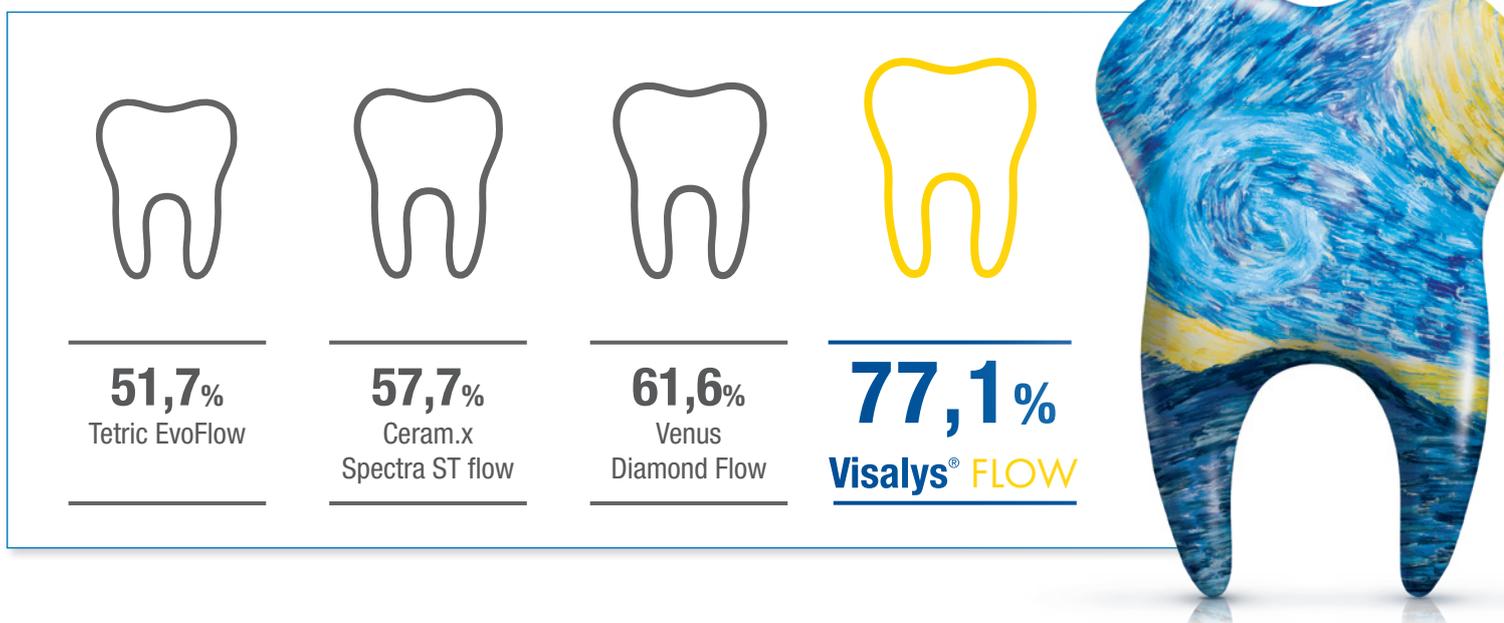


### PERCENTUALE ESTREMAMENTE ELEVATA DI RIEMPITIVI INORGANICI

- Per una stabilità ottimale nel tempo
- Per un'eccellente tollerabilità grazie all'elevata biocompatibilità





# DUREVOLE STABILITÀ DEL COLORE

## VISALYS® FILL Assorbimento d'acqua<sup>5)</sup>

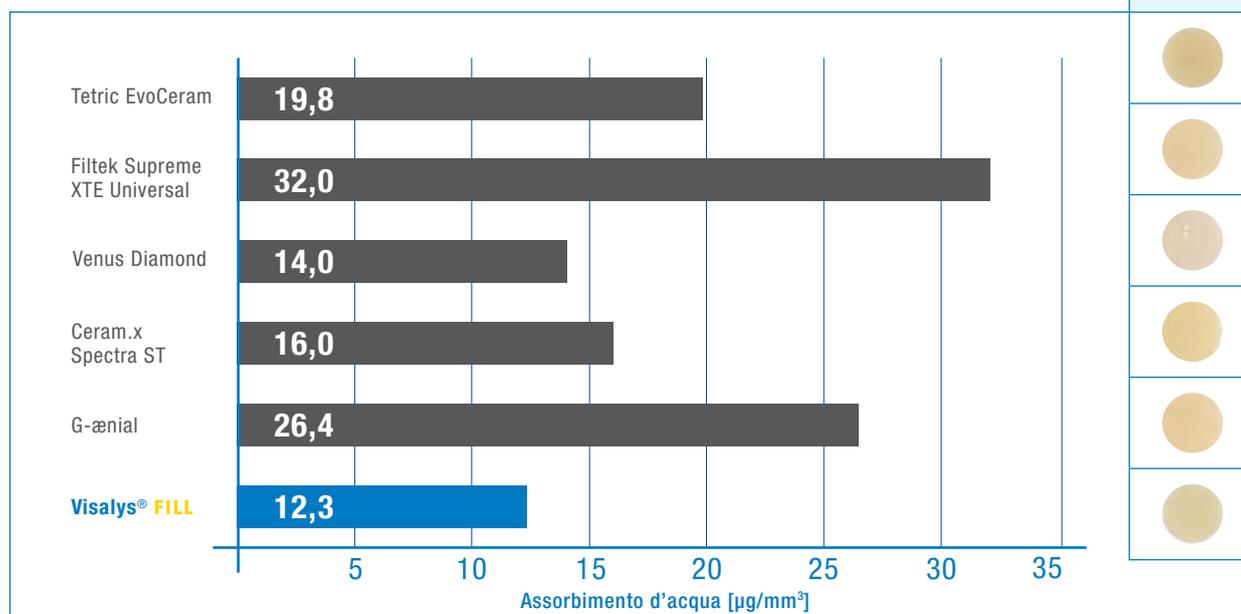


## VISALYS® FLOW Assorbimento d'acqua<sup>5)</sup>

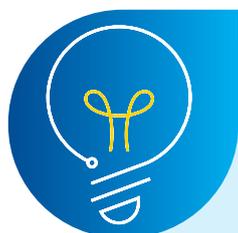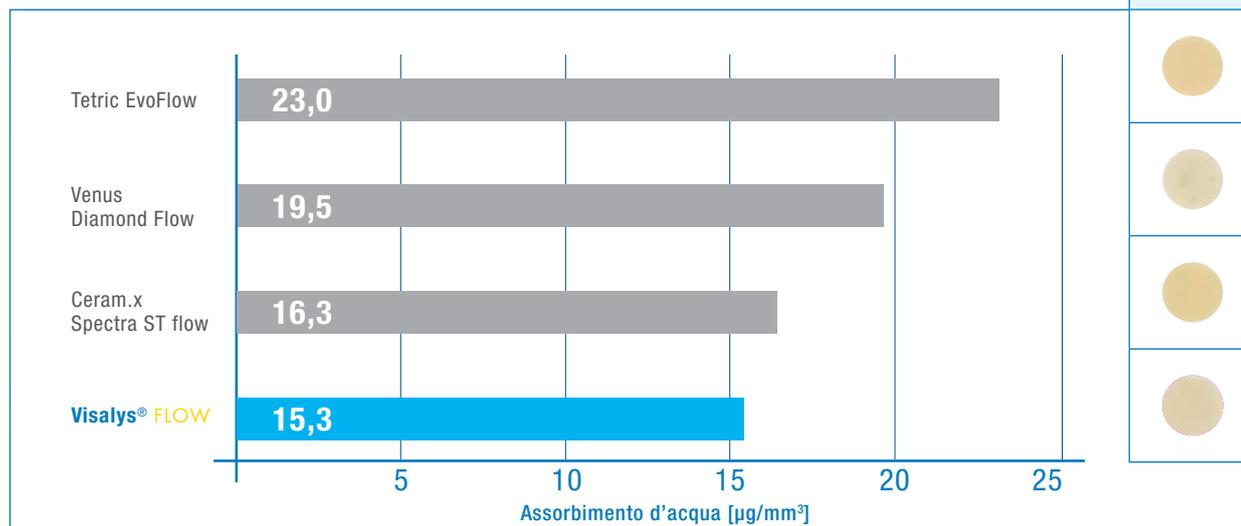

## ASSORBIMENTO D'ACQUA ESTREMAMENTE RIDOTTO

- Previene le discromie delle otturazioni
- Consente risultati estetici di lunga durata

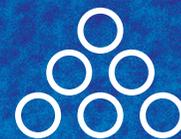


KETTENBACHDENTAL


Simply intelligent

# BASSO RITIRO

## VISALYS® FILL Ritiro volumetrico<sup>7)</sup>

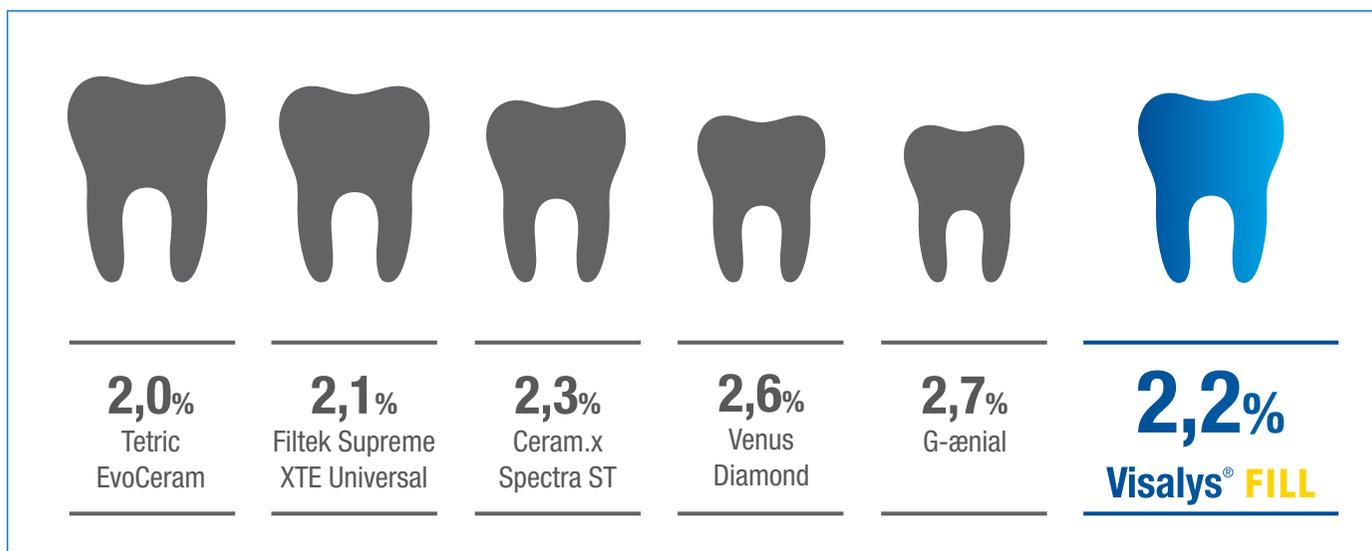

## VISALYS® FLOW Ritiro volumetrico<sup>7)</sup>

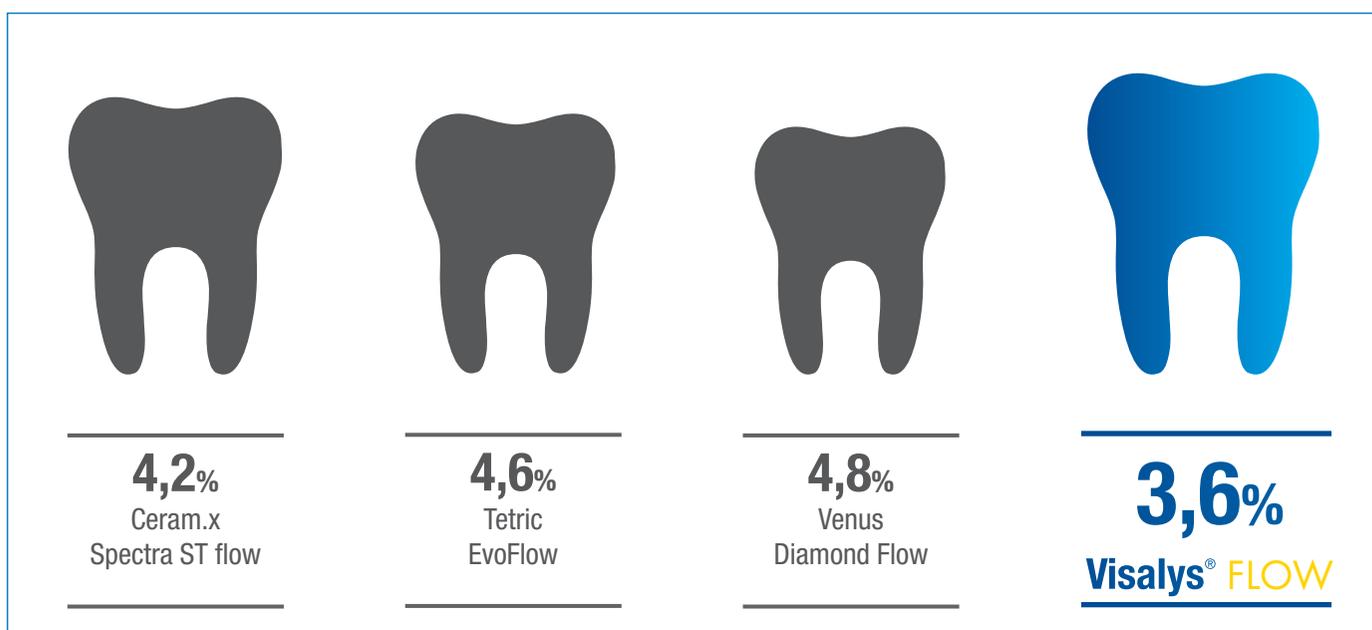

### BASSO RITIRO

- Per una lunga durata
- Per un stabile ancoraggio dell'otturazione nella cavità dentale
- Previene il rischio di formazione di gap marginali e carie secondarie

# ASSORTIMENTO



## Visalys® Fill & Visalys® Flow

### Visalys® Fill

1 x 4 g syringe




A1	REF 1500299
A2	REF 1500399
A3	REF 1500499
A3.5	REF 1500599
A4	REF 1500699
Opaque A2	REF 1500799
Bleach	REF 1500899



### Visalys® Fill

15 x 0,25 g caps

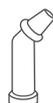


A1	REF 1501299
A2	REF 1501399
A3	REF 1501499
A3.5	REF 1501599
A4	REF 1501699
Opaque A2	REF 1501799
Bleach	REF 1501899



### Visalys® Flow

1 x 1,8 g syringe  
5 x puntali di applicazione

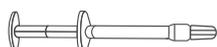

A1	REF 1503099
A2	REF 1503199
A3	REF 1503299
A3.5	REF 1503399
A4	REF 1503499
Opaque A2	REF 1503599
Bleach	REF 1503699



### Accessori

100 x embouts applicateurs  
per Visalys® Flow



REF 1505099



Made  
in  
Germany

## APPUNTI

---



---



---




---



---

Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines · France  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.it

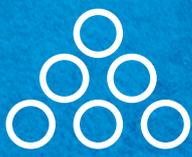  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent



IT0610696\_1024